

## Fisherbrand 真空泵产品指南

**二级真空旋片泵**

旋片真空泵是一种传统的真空泵。重量轻，抽吸速度高。广泛的适用于多种实验室项目：真空（冷冻）干燥；真空蒸馏；真空抽滤；真空探伤；真空镀膜；高真空泵的前泵。

**特点：**结构紧凑，密封性能好，不漏油；流速高，短时间达到稳定的极限真空；耐水蒸气能力强；抗化学腐蚀能力相对同类泵较强；能持久稳定工作，维修率低；油雾少，有利于优化实验室环境；条形油位显示窗，设计更加合理；关机后机油不会回流，真空密封性能强；噪音低，体积小。

**主要技术参数：**

型 号	FB65458	编 号	302105
最终压力	< 1×10 <sup>-2</sup> mbar	流 速	1.8 m <sup>3</sup> /h
外形尺寸	300/120/150 mm	净 重	8.0 kg
电机功率	120 W	连 接	法兰DN16KF
电 源	230V,50Hz		

**二级真空旋片泵****主要技术参数：**

型 号	FB65459	编 号	302106
最终压力	< 2×10 <sup>-3</sup> mbar	流 速	4.6 m <sup>3</sup> /h
外形尺寸	415/150/235 mm	净 重	17.5 kg
电机功率	200 W	连 接	法兰DN16KF
电 源	230V,50Hz		

**二级真空旋片泵****主要技术参数：**

型 号	FB65460	编 号	302107
最终压力	< 2×10 <sup>-3</sup> mbar	流 速	5.8 m <sup>3</sup> /h
外形尺寸	430/150/235 mm	净 重	19.5 kg
电机功率	200 W	连 接	法兰DN16KF
电 源	230V,50Hz		

**二级真空旋片泵****主要技术参数：**

型 号	FB65461	编 号	302108
最终压力	< 2×10 <sup>-3</sup> mbar	流 速	7.2 m <sup>3</sup> /h
外形尺寸	445/150/235 mm	净 重	21.5 kg
电机功率	200 W	连 接	法兰DN25KF
电 源	230V,50Hz		

**二级真空旋片泵****主要技术参数：**

型 号	FB65464	编 号	302109
最终压力	< 2×10 <sup>-3</sup> mbar	流 速	11.0 m <sup>3</sup> /h
外形尺寸	540/170/260 mm	净 重	35 kg
电机功率	550 W	连 接	法兰DN25KF
电 源	230V,50Hz		

# Fisherbrand 真空泵产品指南



## 非抗化学腐蚀滑阀泵

适用于对非刺激性溶剂过滤时的基本配套使用。

**特点：**涵盖大多数基本应用；价格经济；可手持，结构紧凑重量轻且性能优异。

**主要技术参数：**

型 号	FB65540	编 号	400402-02
最终压力	< 290 mbar	流 速	0.55 m <sup>3</sup> /h
外形尺寸	191/102/183 mm	净 重	2.3 kg
电机功率	160 W	连 接	内径6mm软管
电 源	230V,50Hz		




## 非完全抗化学腐蚀隔膜泵

适用于速度较缓的过滤，干燥和气体转移时的配套使用。

**特点：**两种速度；可手持，结构紧凑重量轻；运行安静震动小；安装使用简单快速。

**主要技术参数：**

型 号	FB65451	编 号	420312-01
最终压力	< 60 mbar	流 速	0.6 m <sup>3</sup> /h
外形尺寸	115/165/145mm	净 重	2.3 kg
电机功率	20 W	连 接	内径6或8 mm软管
电 源	230V,50Hz		

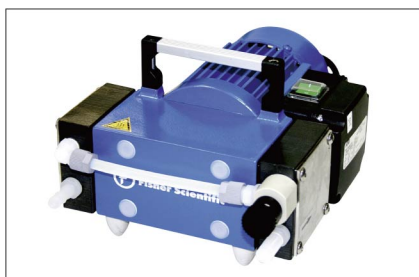

## 抗化学腐蚀两级隔膜泵

抗化学腐蚀的真空泵，特别适用于需要抗化学腐蚀或需要长时间不断运行的场合。所有与气体接触的部位都做特氟龙（聚四氟乙烯PTFE）处理并用碳纤维加固，完全保证了泵的抗化学腐蚀性能。隔膜采用三明治结构（即多层结构），以增加隔膜的韧性和强度。

**特点：**完全的抗化学腐蚀能力；结构紧凑容易使用；真空稳定，易于控制且可长久运行；不消耗水，环保性强；设计新颖质量可靠；无须保养，维修方便。

**主要技术参数：**

型 号	FB65452	编 号	400171-23
最终压力	< 8 mbar	流 速	1.0 m <sup>3</sup> /h
外形尺寸	195/235/145 mm	净 重	6.5 kg
电机功率	60 W	连 接	内径8 mm软管
电 源	230V,50Hz		



## 抗化学腐蚀两级隔膜泵

**主要技术参数：**

型 号	FB65453	编 号	4000482-34
最终压力	< 8 mbar	流 速	2.3 m <sup>3</sup> /h
外形尺寸	230/265/169 mm	净 重	11.2 kg
电机功率	180 W	连 接	内径8mm软管
电 源	230V,50Hz		



## 抗化学腐蚀三级隔膜泵

**主要技术参数：**

型 号	FB65454	编 号	400177-35
最终压力	< 2 mbar	流 速	2.0 m <sup>3</sup> /h
外形尺寸	200/260/150 mm	净 重	10.3 kg
电机功率	90 W	连 接	内径8mm软管
电 源	230V,50Hz		